

BIOCREDIT COVID-19 Ag


SARS-CoV 2 Antigénový test

- » Prvá komercializácia technológie Black Gold Particle na svete (vysoká citlivosť a špecificita)
- » Užívateľsky prívetivý dvojfarebný systém (kontrolná čiara: červená, testovacia čiara: čierna)
- » Vyhodnotenie testu (5 - 8 minút)
- » Jednoduchá detekcia antigénu SARS-CoV 2

Technológia Black Gold Particle



Diferencovaná
konjugovaná
technológia Black Gold

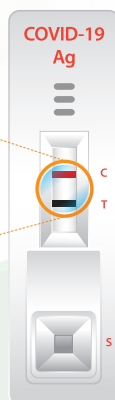

Dvojfarebný systém

Iba 8 minút!



YouTube BIOCREDIT COVID-19



BIOCREDIT COVID-19 Ag rýchlotest

Použitie	Detekcia antigénu SARS-CoV 2
Balenie	20 testov / sada
Skladovanie	1-40 °C
Typ vzorky	Nasopharyngeálny
Doba použiteľnosti	12 mesiacov od dátumu výroby
Doba vyhodnotenia	5 - 8 minút

COVID-19 rýchly diagnostický test

POSTUP


Vložte výterovú tyčinku so vzorkou do skúmavky a zatočte tyčinkou 5 - 10 krát.

Vytiahnite výterovú tyčinku jemným stlačením jej špičky.

Pevne zatlačte filtračné viečko skúmavky.

Otočte skúmavku a jemným stlačením nakvapkajte 3 - 4 (90 - 150 ul) kvapky do jamky na vzorku (S).

Odčítajte výsledok o 5 - 8 minút.

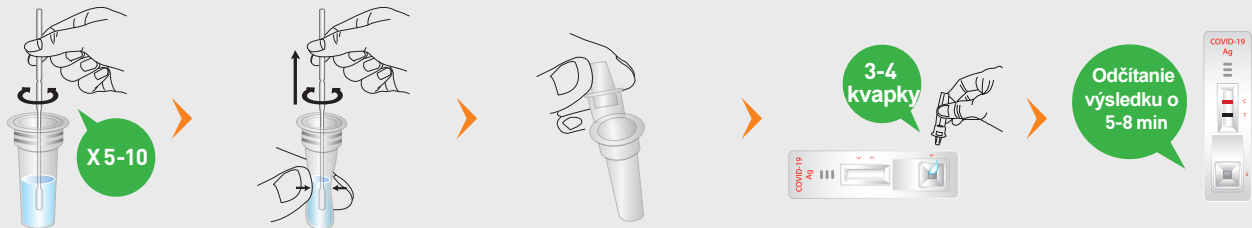

INTERPRETÁCIA

NEGATÍVNY




Jeden **červený** pruh „C“ v okienku výsledkov.

POZITÍVNY



Dva pruhy, **čierny** v línii testu a **červený** v kontrolnej línii „C“ v okienku výsledkov.

NEPLATNÝ

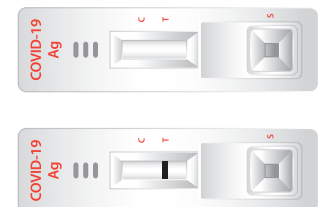

V okienku výsledkov chýba línia „C“. Odporúča sa test zopakovať.

